



オートクレーブ用洗剤

# OSクリア

クエン酸パワーで水アカ・汚れを一気にクリア！  
チャンバー内がぴかぴかになる驚きの洗剤力

- オートクレーブメーカーが共同開発
- 1本/約5回分で経済的
- 月1回の簡単お手入れ
- 高い洗剤力のひみつはクエン酸
- 酸性でも大切な機器を傷めない配合

標準販売価格：6,300円（税別）

内容量：2,000ml

成分：クエン酸、リン酸、その他

目安使用量：400～500ml（1回）



## ●ご使用方法●

チャンバーに  
本液を入れる

通常運転を  
する

浮き出た汚れ  
を拭き取る

排水後、通常  
運転で水洗い  
をする

※ご使用前に、本液裏面の注意事項及び使用方法を必ずお読みください

販売元

株式会社 大平製作所

〒720-0074 広島県福山市北本庄1-8-14  
TEL 084-924-0650 FAX 084-925-5288

販売代理店



オートクレーブ用洗浄液

# OSクリア




1回の洗浄で驚くほどぴかぴかになります！  
(使用量:約450ml 運転時間:133℃ 10分)

BEFORE

AFTER



洗浄前

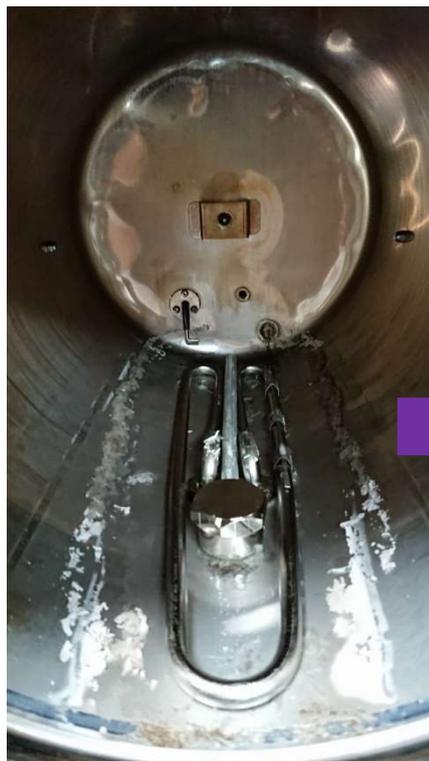

洗浄後、浮き出た  
汚れを拭き取る前



濡れた布で  
拭き取った後

- 汚れにより、1回の洗浄では十分に落ちない場合があります。
- 洗浄後、浮き出た汚れ・フィルターの清掃は必ず行ってください。

# OSクリア 使用方法

①古い水をすべて排水後、新しい水を貯水タンクの半分まで注ぐ。



②底板・棚板を取り出してから、チャンバーに直接本液を入れる。前方から液が溢れ出ないように注意しながら、可能な限り注ぐ。  
(ボトルを横向きにすると、注ぎ易くなります)



③滅菌温度・時間（高温10分、乾燥0分）を設定後、通常運転を開始する。  
必ず乾燥は0分（なし）に設定してください。



④滅菌終了後、チャンバー内の粗熱が取れてから、濡れた布でチャンバーの汚れを拭き取る。



ストレーナーを取り外す場合、付属の「おそうじキャップ」をストレーナーが取り付けいていたパイプにかぶせて、中にゴミ等が入らないように十分に注意してください。

⑤ストレーナー内のフィルターを水洗いした後、すべて元の位置に戻す。



⑥貯水タンクの水をすべて排水し、新しい水を上限ゲージまで注ぐ。  
⑦液を洗い流すため、③と同じ運転を行い、終了後にすべて排水する。（本液は入れない）  
⑧まだチャンバー内に汚れがあるようなら、上記の方法で再度拭き取る。



ご使用前に、本品裏面に記載されている注意事項を必ずお読みください。